



ROTAČNÝ DELIČ PT 200

Bezchybná a porovnateľná analýza je úzko spojená s **presnou manipuláciou so vzorkou**. Len reprezentatívna vzorka východiskového materiálu môže poskytnúť **zmysluplné výsledky analýzy**. Rotačné vzorkovače zaisťujú **reprezentatívnosť** vzorky a tým **reprodukovateľnosť analýzy**.

Rotačný vzorkovač PT 200 je predpokladom pre bezprašné delenie a redukciu **väčších množstiev sypkých materiálov**. Je vhodný pre práškové alebo granulované sypké materiály. Šírka drážky upravuje pomer frakcií a teda množstvo vzorky.

VÝHODY PRODUKTU

- | presné delenie aj väčších množstiev materiálu
- | modulárna konštrukcia
- | nastaviteľný stupeň delenia
- | odber jednej až troch vzoriek
- | rýchlopínacie vývody a jednoduché upevnenie spodného kužela
- | možnosť dávkovej a kontinuálnej prevádzky
- | otáčky regulujúca rotačná trubica
- | priame digitálne pripojenie pre vibračný podávač DR 100
- | postup delenia podľa normy DIN 51701

PRÍKLADY APLIKÁCIÍ

cementový slinok, chemikálie, hnojivá, kovy prášky, káva, minerály, múky, orechy, piesok, plnidlá, prací prášok, pôdy, semená, stavebné materiály, zrná, ...

PRINCÍP FUNKCIE

Delený materiál sa presypáva násypkou cez vibračný žliabok vibračného podávača do deliča s otočnou trúbkou. Celkové množstvo materiálu je rovnomerne rozdelené s konštantnými otáčkami (50 min⁻¹) po kružnici spodného kužela trúbkou rotujúcou v rámci horného kužela. Výmenné spodné kužele majú jeden, dva alebo tri vývody s plynule nastaviteľnou šírkou odberovej štrbiny. Pri každej otáčke sa do zásobnej fľaštičky odsype oddelené množstvo odpovedajúce šírke štrbiny. Zvyšok materiálu prechádza strojom do veľkej nádoby na prepád z odberu.



ROTAČNÝ DELIČ PT 200

TECHNICKÉ ÚDAJE

Aplikácie	odber vzoriek, delenie vzoriek, zmenšovanie vzoriek
Oblasť použitia	biológia, chémia / plasty, geológia / metalurgia, jedlo, medicína / farmaceutika, poľnohospodárstvo, sklo / keramika, stavebné materiály, strojárstvo / elektronika, životné prostredie / recyklácia
Vstupný materiál	sypké materiály
Vstupná veľkosť materiálu *	<= 10 mm
Rotačná rýchlosť	50 min ⁻¹
Počet skupín	1 / 2 / 3 (v závislosti na spodnom kuželi)
Nastavenie času	digitálny, 1, 3, 5, 10 - 60 min / nepretržitá prevádzka
Veľkosť otvoru, priebežne nastaviteľná	0 - 159 mm (1 vývod) // 0 - 110 mm (2 vývody) // 0 - 53 mm (3 vývody)
Max. stupeň delenia	1 x 1:5 (1 vývod) 2 x 1:7,2 (2 vývody) 3 x 1:15 (3 vývod)
Min stupeň delenia *	1 x 1:26 (1 vývod) // 2 x 1:26 (2 vývody) // 3 x 1:26 (3 vývody)
Obsah zbernej nádoby	26 l
Objem nádoby	250 ml / 500 ml
Elektrické napájanie	100-240 V, 50/60Hz
Pripojenie k elektrickej sieti	1-fázové
Š x V x H	520 x 1050 x 551 mm / 572mm x 1307 x 551 incl. DR 100
Váha netto	~ 46 kg (vr. DR 100)
Normy	CE

* v závislosti na vstupnom materiále a nastavení zariadenia / nastavenie


www.retsch.sk/pt200

OBJEDNACIE DÁTA A ŽIADOSŤ

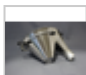
ROTAČNÝ VZORKOVAČ PT 200


PT 200 pohonná jednotka

vrátane 10GLZ-fľašiek na vzorky 500 ml a zbernej nádoby 26 litrov (vibračný podávač, podávaciu súpravu a spodný kužel objednávajte samostatne)


40.412.0004  PT 200 pohonná jednotka 100–240 V, 50/60 Hz

SPODNÉ KUŽELE A PRÍSLUŠENSTVO PT 200

42.787.0010  Spodný kužel s 1 rýchlopínacie zásuvkou, so závitom GL 55, šírka otvoru 159 mm, nastaviteľný deliaci pomer max. 1: 5

42.787.0011  Spodný kužel s 2 rýchlopínacími zásuvkami, so závitom GL 55, šírka otvoru 110 mm, nastaviteľný deliaci pomer max. 2 x 1: 7.2

42.787.0012 Spodný kužel s 3 rýchlopínacími zásuvkami, so závitom GL 55, šírka otvoru 53 mm, nastaviteľný deliaci pomer max. 3 x 1: 15

22.003.0013  Záchytná nádoba, 26 litrov, plastová

22.523.0001  Fľaše na vzorky, so závitom GL 55, 250 ml, 10 kusov

22.523.0002  Fľaše na vzorky, so závitom GL 55, 500 ml, 10 kusov

PRÍSLUŠENSTVO PRE PT 200

99.200.0022  IQ/OQ Dokumentácia pre PT 200

VIBRAČNÝ PODÁVAČ DR 100 PT 200

DR 100 pohonná jednotka (dávkovacie sadu objednávajte, prosím, samostatne)

70.938.0001  DR 100 pohonná jednotka 220–240 V, 50 Hz

70.938.0002



DR 100 pohonná jednotka

110–120 V, 60 Hz

72.020.0022

Podávacia súprava DR 100/3,5 l pre PT 200,
vrátane 75 mm podávacieho žliabku, držiaka podávacieho žliabku, násypky 3,5 l,
držiaka násypky a dátového kábla.

72.020.0023

Podávacia súprava DR 100/22 litrov pre PT 200,
vrátane podávacieho žliabku 75 mm, držiaka podávacieho žliabku, kapacita 22
litrov, držiaka na násypku a dátového kábelu