



ULTRASONİK BANYO UR


Retsch ürün portföyünde elekleri ve öğütücü aparatların temizliği için 3 farklı ölçüde ultrasonik banyo bulunur. UR1 203 mm çapına kadar olan elekleri, UR2 450 mm çapına kadar olan elekleri ve UR3 aynı anda 5 adet 203 mm çapına kadar olan eleklerin temizliğinde kullanılır. Bu temizleme şekli ile eleklerde elle yapılacak temizlik esnasında oluşacak hazarın önüne geçilir ve eleklerin kullanım ömrü uzatılmış olur.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- | Hızlı, hassas ve yüksek verimli temizleme
- | Universal ve kompakt
- | Kolay kullanım, zamandan ve paradan tasarruf
- | Yoğun ayırma ve gaz boşaltımı
- | low maintenance
- | Uzun ömürlü

FONKSİYON PRENSİBİ

Yüksek frekans jeneratörü temizleme solüsyonu aktarılmak üzere rezonansa neden olan, saniyede 35000 salınım üretir. Ses alanının enerji yoğunluğu, boşluk etkisini oluşturur. Basınç ve çekiş dolayısıyla mikrosaniyeler içinde sayısız küçük kabarcıklar oluşur ve çöker. Homojenizasyon, dağılım ve gaz giderme en derin ve en erişilebilir yerlerde bu partikülleri tarafından tetiklenir.

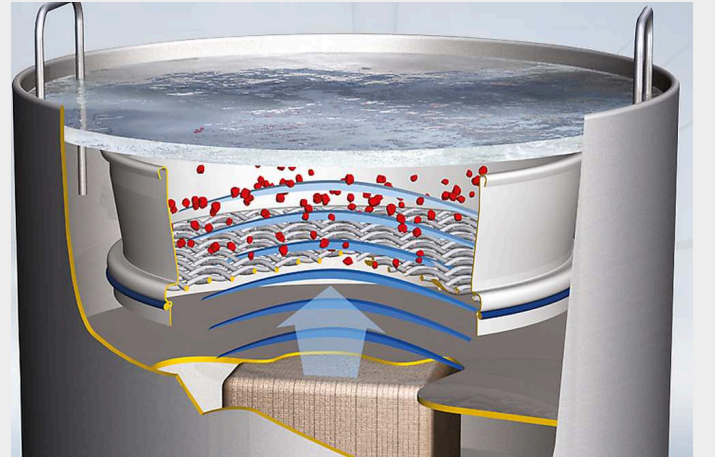

ULTRASONİK BANYO UR

TEKNİK VERİ

Uygulamalar

Temizleme, dispersiyon, degazing

Besleme malzemesi

elekler, cam ve metal parçaları, süspansiyonlar ..

Parti boyutu / besleme miktarı

UR 1: 1 elek 200 x 50 mm, 8 "x 2"

UR 2: 1 elek 450 x 100 mm

UR 3: 5 elek 200 x 50 mm, 8 "x 2"

Zaman ayarı

0 - 15 dk

Konteyner hacmi

UR 1: 5.7 l

UR 2: 42 l

UR 3: 45 l

Oscillating tank Ø x H / W x H x D

UR 1: 260 x 260 mm

UR 2: 570 x 460 mm

HF devamlı maksimum çıkış:

UR 1: 5.7 l

UR 2: 42 l

UR 3: 45 l

Elektriksel veriler

farklı voltajlar

Güç bağlantısı

1-faz

G x Y x D

UR 3: 630 x 530 x 350 mm

Ø x H / W x H x D

UR 1: 35 kHz, 2 x 240 W

UR 2: 35 kHz,...

Net ağırlık

UR 1: ~ 5 kg

UR 2: ~ 21 kg

UR 3: ~...

Standartlar

CE

www.retsched.com.tr/ur







SIPARIŞ BİLGİSİ

ULTRASONİK BANYOLAR UR 1 / UR 2 / UR 3

(lütfen kapak ve sepeti ayrı sipariş edin)

70.791.0001		UR 1	230 V, 50/60 Hz	salınım tankı: 24,5 cm Ø x 13 cm,	5,7 litre
70.791.0002		UR 1	110 V, 60 Hz	salınım tankı: 24,5 cm Ø x 13 cm,	5,7 litre
70.791.0003		UR 2	230 V, 50/60 Hz	salınım tankı: 50.0 cm Ø x 20 cm,	42 litre
70.791.0004		UR 2	110 V, 60 Hz	salınım tankı: 50.0 cm Ø x 20 cm,	42 litre
70.791.0005		UR 3	220–240 V, 50/60 Hz	salınım tankı: 50.0 x 30 x 30 cm,	45 litre
70.791.0006		UR 3	110–130 V, 50/60 Hz	salınım tankı: 50.0 x 30 x 30 cm,	45 litre

AKSESUARLAR UR

09.107.0249		Kapak, stainless steel, UR 1 için
09.107.0250		Kapak, stainless steel, UR 2 için
09.107.0395		Kapak, stainless steel, UR 3 için
09.145.0001		Sepet, stainless steel, UR 1 için
09.145.0002		Sepet, stainless steel, UR 2 için
09.145.0003		Sepet, stainless steel, UR 3 için
05.620.0001		Deterjan TICKOPUR RW 77, 1 litre