



NUMUNE BÖLÜCÜ RT 6.5 - RT75

Dođru numune alma,kusursuz ve karşılaştırılabilir analiz için önemlidir . Örnek bir temsil anlamlı analiz sonuçları sağlar,böylece tekrarlanabilirlik kolaylaşır.

RT ideal ve örnek bölücüdür.Kullanımı, temizliği kolay ve elektrik kaynağı gerekmez.

ÜRÜN AVANTAJLARI


- | Laboratuvarda ve uygulama yerinde kullanım için
- | Yüksek hassasiyetli,manuel ayırma işlemi
- | DIN 51701 standartlarına göre bölme işlemi

APLIKASYON ÖRNEKLERİ

kahve, kimyasallar, yapı malzemeleri..., çimento klinker

FONKSIYON PRENSIBI

Örnek ayırma, kapların bölümlerine eşit olarak iyi karışmış,örnek dökmek için kullanılır. Malzeme bölünmesi,çıkış altında iki toplama kabı içine ters yönde dönüşümlü olarak gerçekleşir. Her operasyon ile beslenen numune yarıya düşer. Bu, gerekli bölünme miktarı elde edilene kadar tekrar edilebilir.

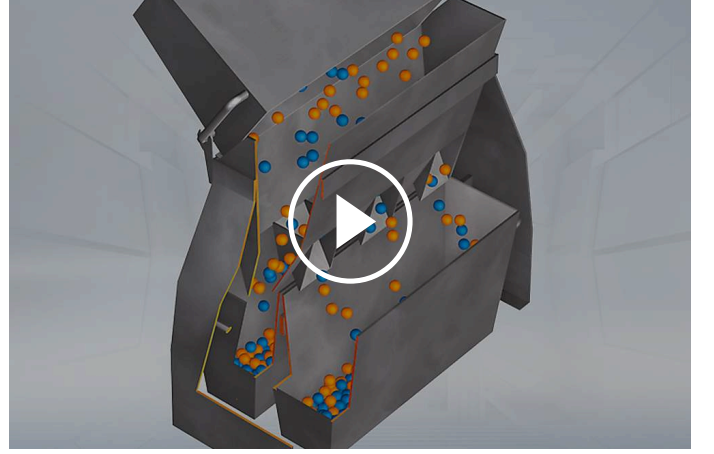

[Videoyu izlemek için tıklayın](#)

TEKNİK VERİ




Uygulamalar	örnekleme ve örnek bölme
Yuva slot boyutu	RT 6.5: 6.3 mm RT 12.5: 12.5 mm RT 25: 25.0 mm RT 37.5: 37.5 mm RT 50: 50 mm RT 75: 75 mm
Slot sayısı	RT 6.5: 12 RT 12.5: 18 RT 25: 16 RT 37.5: 12 RT 50: 8 RT 75: 6
Uygulama alanı	biyoloji, kimya / plastik, tarım, ..
Besleme malzemesi	yüksek miktarda malzeme
Malzeme giriş büyüklüğü	RT 6.5: ~ 4 mm RT 12.5: ~ 8 mm RT ...
Parti boyutu / besleme miktarı	RT 6.5:
Bölüm sayısı	2
G x Y x D	RT 6.5: 30 x 27 x 25 cm RT 12.5: 30 x 27 x 25 cm RT 25: 62 x 42 x 26 cm RT 37.5: 62 x 42 x 26 cm RT 50: 62 x 42 x 26 cm RT 75: 62 x 42 x 26 cm
Net ağırlık	RT 6.5: ~ 3.5 kg RT 12.5: ~...

* besleme malzemesi ve cihaz yapılandırmasına / ayarlarına bağlıdır

www.retsched.com.tr/rt

SIPARIŞ BİLGİSİ

Paslanmaz çelikten toplama haznesi ve bölme kafası, kaplamalı çelik sacdan stand

40.610.0001		Numune Bölücü RT 6.5 12 yuvalı, 6,3 mm, g:300 x y:270 x d:250 mm
40.610.0002		Numune Bölücü RT 12.5 18 yuvalı, 12,5 mm, g:300 x y:270 x d:250 mm
05.000.0019		1.5 litre yedek toplama kabı (RT 6.5 ve RT 12.5 için), 1 adet

3 HAZNELİ ÖRNEK BÖLÜCÜLER 8 LITRE

Tüm parçalar galvaniz sacdan imal edilmiştir.

40.610.0003		Numune Bölücü RT 25 16 yuvalı, 25.0 mm, g:620 x y:420 x d:260 mm
40.610.0004		Numune Bölücü RT 37.5 12 yuvalı, 37,5 mm, g:620 x y:420 x d:260 mm
40.610.0005		Numune Bölücü RT 50 8 yuvalı, 50.0 mm, g:620 x y:420 x d:260 mm
40.610.0006		Numune Bölücü RT 75 6 yuvalı, 75.0 mm, g:620 x y:420 x d:260 mm
42.147.0002		Yedek toplama kabı 8 litre (RT 25, RT 37.5, RT 50 ve RT 75 için), 1-GLZ parçası