



BESLEYICI DR 100

Titreşimli besleyici DR 100, **sürekli besleme ve taşıma** ile malzemelerin ve ince tozların dökme işlemi gerçekleştirir. DR 100 besleme ünitesi ,RETSCH'in bölücü ,partikül ölçüm cihazları ve aynı zamanda diğer öğütücü cihazları için uygundur. Performansı, uyumu ve kompakt tasarımı sayesinde oldukça kullanışlıdır. RETSCH titreşimli besleyici garantili **tekrarlanabilir kesin sonuçları ile**, laboratuvar ve test cihazlarının verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

ÜRÜN AVANTAJLARI


- | Düzgün malzeme beslenmesi için güçlü kullanım
- | Malzemenin bulunduğu seviye ve akış hızı ayarlanabilir.
- | Dijital hız ayarı
- | Arayüz ile opsiyonel kontrol
- | Dijital zaman ayarı
- | Kompakt kontrol ve besleme ünitesi
- | Beslemeyi yapan metal kanalın kolay temizlenmesi
- | Değişik besleme kanalı içeren,geniş aksesuar aralığı

APLIKASYON ÖRNEKLERİ

kahve, kimyasallar, yapı malzemeleri, çimento klinker, ...

FONKSIYON PRENSIBI

Besleme malzemesi taşıma oluđu üzerinden geçer. Bu elektromanyetik şarj vibratör ile 50 (veya 60) Hz titreşimle yapılır. Debi sürekli ayarlanabilir. Hazne üzerindeki plaka yüksekliđi ürüne uygun olarak ayarlanabilir. DR 100 bir arayüz ile, örneđin Retsch ZM 200 Ultra Santrifüj öğütme cihazına bağlanarak kullanılabilir. Kompakt, bakım gerektirmeyen tasarımı ile titreşimli besleyici cihazları birçok cihaza entegre edilebilir.

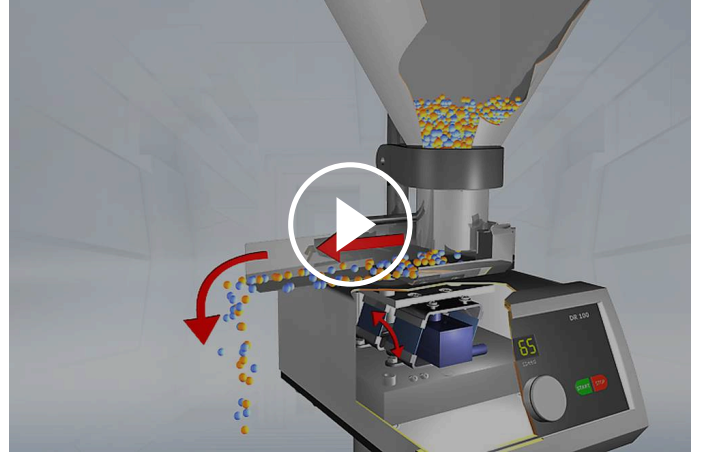

[Videoyu izlemek için tıklayın](#)

BESLEYİCİ DR 100

TEKNİK VERİ

Uygulamalar	besleme, taşıma
Uygulama alanı	biyoloji, kimya / plastik, tarım, ..
Besleme malzemesi	dökülebilir dökme malzeme
Malzeme giriş büyüklüğü	<2 mm (15 mm Kanal) // <6 mm (40 mm Kanal) // <12 mm (75 mm kanal)
Hacim akışı	
Zaman ayarı	dijital, 1 - 99 dk / devamlı
Hız ayarı 2	dijital, 1 - 99 / 0 - 5 l/dk,...
Oluk genişliği	15 mm / 40 mm / 75 mm / 75/40 mm
Oluk uzunluğu	210 mm
Besleme hunisi hacmi	2.8 l (15 mm oyuk) 2.8 l (40 mm oyuk)
Elektriksel veriler	farklı voltajlar
Güç bağlantısı	1-faz
G x Y x D	260 x 420 x 280 mm
Net ağırlık	9,7 kg
Standartlar	CE

* besleme malzemesi ve cihaz yapılandırmasına / ayarlarına bağlıdır



www.retsche.com.tr/dr100

SIPARIŞ BİLGİSİ

TİTREŞİMLİ BESLEYİCİ DR 100

TİTREŞİMLİ BESLEYİCİ DR 100 AYRI BİLEŞENLER

DR 100 MOTOR ÜNİTESİ (LÜTFEN BESLEME KİTİNİ AYRICA SIPARIŞ EDİN)

70.938.0001		DR 100 motor ünitesi	220-240 V, 50 Hz
70.938.0002		DR 100 motor ünitesi	110-120 V, 60 Hz

BESLEME KİTLERİ DR 100


72.020.0009	Besleme kiti (push fit besleme oluğu 15 mm, tutucu, hazne 2,8 litre ve fikstür)
72.020.0010	Besleme kiti (push-fit besleme oluğu 40 mm, tutucu, 2,8 litre hazne ve fikstür)
72.020.0011	Besleme kiti (75 mm push-fit besleme oluğu, tutucu, 3,5 litre hazne ve fikstür)
72.020.0017	Besleme kiti (75 mm push-fit besleme oluğu, tutucu, hazne 22 litre ve fikstür)
72.020.0012	Besleme kiti (75/40 mm push-fit besleme oluğu, tutucu, 3,5 litre hazne ve fikstür)

PUSH-FIT KANALLAR DR 100, UZUNLUK 210 MM


03.729.0035		Push-fit besleme oluğu	stainless steel	genişlik 15 mm	15/40 tutucu için
03.729.0036		Push-fit besleme oluğu	stainless steel	genişlik 40 mm	15/40 tutucu için
03.729.0037		Push-fit besleme oluğu	stainless steel	genişlik 75 mm	tutucu 75 için
03.729.0040		Push-fit besleme oluğu	stainless steel	genişlik 75/40 mm	tutucu 75 için
03.729.0039		Push-fit besleme oluğu	stainless steel	V şekli	15/40 tutucu için


PUSH-FIT KANALLAR İÇİN TUTUCULAR DR 100


03.018.0007  Tutucu 15/40 15 mm, 40 mm ve V şekilli geçmeli besleme oluğu için


03.018.0008  Tutucu 75 Push-fit besleme oluğu 75 mm için

HAZNELER DR 100

03.785.0146  Besleme hunisi 2.8 litre stainless steel 15 ve 40 mm oluklar için

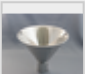02.785.0019  Besleme hunisi 3,5 litre stainless steel 75 ve 75/40 mm oluklar için


02.785.0251  Besleme hunisi 22 litre stainless steel 75 oluk için

03.785.0151  Besleme hunisi 0.4 litre stainless steel 15 ve 40 mm oluklar için

03.785.0159  Besleme hunisi 2.8 litre stainless steel V-oluk için


DR 100 HUNILERI İÇİN BAĞLANTILAR


02.266.0259  0.4 litre ve 2.8 litre hazne için bağlantı

02.266.0260  Hazne bağlantısı 3,5 litre ve 22 litre

VIBRATORY FEEDER DR 100 FOR ZM 300




DR 100 motor ünitesi (lütfen besleme kitini ayrıca sipariş edin)

70.938.0001  DR 100 drive unit 220–240 V, 50 Hz

70.938.0002  DR 100 drive unit 110–120 V, 60 Hz

72.020.0018 Feeding kit DR 100-75/40 for ZM 300, incl. push-fit feed chute 75/40 mm, length 250 mm, holder for push-fit feed chute, hopper 3.5 litres and fixture for hopper, stand with data cable





PUSH-FIT FEED CHUTE DR 100 FOR ZM 300

03.729.0054		Push-fit besleme oluđu, stainless steel, genişlik 40 mm, uzunluk 250 mm
03.729.0056		Push-fit besleme oluđu, stainless steel, genişlik 75/40 mm, uzunluk 250 mm
03.729.0055		Push-fit besleme oluđu, stainless steel, V şekli, genişlik 40 mm, uzunluk 250 mm

Holders for push-fit chutes see above



VIBRATORY FEEDER DR 100 FOR SR 300/SK 300

DR 100 motor ünitesi (lütfen besleme kitini ayrıca sipariş edin)

70.938.0001		DR 100 motor ünitesi	220–240 V, 50 Hz
70.938.0003		DR 100 motor ünitesi	220–240 V, 60 Hz
70.938.0010		DR 100 motor ünitesi	200 V, 50 Hz
70.938.0006		DR 100 motor ünitesi	200 V, 60 Hz
72.020.0019		Feeding kit DR 100/3.5 litres for SR 300/SK 300, incl. push-fit feed chute 75 mm, holder for push-fit feed chute, hopper 3.5 litres and holder for hopper and fixture	
72.020.0020		Feeding kit DR 100/22 litres for SR 300/SK 300, incl. push-fit feed chute 75 mm, holder for push-fit feed chute, hopper 22 litres and holder for hopper and fixture	

VIBRATORY FEEDER DR 100 FOR PT 100

DR 100 motor ünitesi (lütfen besleme kitini ayrıca sipariş edin)

70.938.0001		DR 100 motor ünitesi	220–240 V, 50 Hz
70.938.0002		DR 100 motor ünitesi	110–120 V, 60 Hz
72.020.0021		Feeding kit DR 100-75/40 for PT 100,	

incl. push-fit feed chute 75/40 mm, holder for push-fit feed chute,
hopper 3.5 litres, fixture for hopper and stand with data cable

VIBRATORY FEEDER DR 100 PT 200

DR 100 motor ünitesi (lütfen besleme kitini ayrıca sipariş edin)

70.938.0001  DR 100 motor ünitesi 220–240 V, 50 Hz

70.938.0002  DR 100 motor ünitesi 110–120 V, 60 Hz

72.020.0022 Feeding kit DR 100/3.5 litres for PT 200,
incl. push-fit feed chute 75 mm, holder for push-fit feed chute,
hopper 3.5 litres, fixture for hopper and data cable

72.020.0023 Feeding kit DR 100/22 litres for PT 200,
incl. push-fit feed chute 75 mm, holder for push-fit feed chute,
hopper 22 litres, fixture for hopper and data cable